


Haier LX-185T100R High-Speed Tischzentrifuge

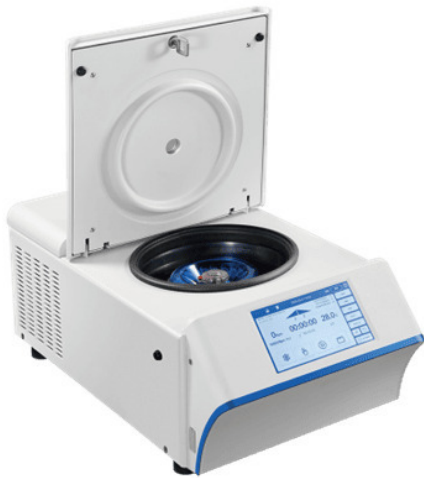

Haier LX-185T100R: Eine gekühlte High-Speed Tischzentrifuge mit Touchdisplay, kurzer Vorkühlzeit und großer Auswahl an Rotoren

- Kurze Vorkühlzeit von nur 7 Minuten, von Raumtemperatur auf 4°C
- Präzise Temperatur- und Geschwindigkeitssteuerung sorgen für optimale Resultate
- Optimiertes Sound Design für geringe Lärmemissionen (<52db(A))
- Echtzeit Erkennung eines Ungleichgewichts, mit sofortigem Shut-Down-Schutz im Falle eines Ungleichgewichts
- Schnelle Probenverarbeitung bei maximalen Geschwindigkeiten von bis zu 18.500 rpm (30.130 x g)
- Bürstenloses Induktionsmotordesign, um eine wartungsarme Nutzung zu sichern und der Eliminierung von Kohlenstoffpartikel Emissionen
- Automatische RFID Rotor Identifikation für maximale Anwendungssicherheit
- Intuitives und handschuhfreundliches 7 Zoll Touchdisplay
- Über 1000+ Programme mit alpha-numerischen Namen, um die Zeit zwischen den Schnellstarts zu verkürzen
- 9 Beschleunigungs- + 10 Entschleunigungsphasen
- Geschwindigkeits-, Zeit- und Krafteinstellungen können im laufenden Prozess geändert werden
- Zugriffskontrolle durch verschiedene User Logins mit Passwortschutz und unabhängigen Programmmöglichkeiten je nach Nutzer

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen: (BxTxH) 420 x 680 x 330 mm

Maximum Kapazität: 6 x 100 ml

Maximum Geschwindigkeit: 18.500

Maximale RCF: (xg) 30.130

Timer-Bereich: 1s bis zu 99h59m59s

Max. Geräuschpegel: <52 dB(A)

Gewicht: 57 kg

Leistung: 1200 W

Spannung 220-240 V / 50 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Versiegelt, Stahlring oder Swing-Out
- Verschiedene Größen zwischen 48 * 1,5 / 2ml bis zu 6 x 100 ml