

AKTIONSWOCHEN -86°C

Arctiko ULUF P500GG*
Dual Cool Kühlsystem



Sonder-
Preis
8.499 €

Arctiko ULUF P390GG*
Dual Cool Kühlsystem




Sonder-
Preis
8.099 €

**SOFORT
ab Lager
lieferbar**
(solange der Vorrat reicht)

zzgl. Lieferung (2 Jahre Garantie)

TOP-MERKMALE

- Um ein Vielfaches höhere Ausfallsicherheit durch zwei redundant laufende Kühlkreisläufe.
- Sehr kurze Erholzeiten nach Türöffnung.
- Sehr schnelle „Cool Down to setpoint - 80°C“ Zeit durch stärkere Leistung des Gesamtsystems.
- Direktkühlung (auch zwischen den Ebenen).
- Die Arctiko DUAL COOL Systeme verfügen über eine herausragende (fast lineare) Temperaturverteilung im GESAMTEN Innenraum.
- Nur 49 db(A) durch Noise Reduction Kit.
- Integriertes Backupsystem.
- ECO-Modus zur weiteren Reduktion des Energieverbrauchs.
- Innenraum für gängige Kryo-Racks für eine optimale Kapazität von Proben.
- Umweltverträgliche Kältemittel und reduzierte Energiekosten.

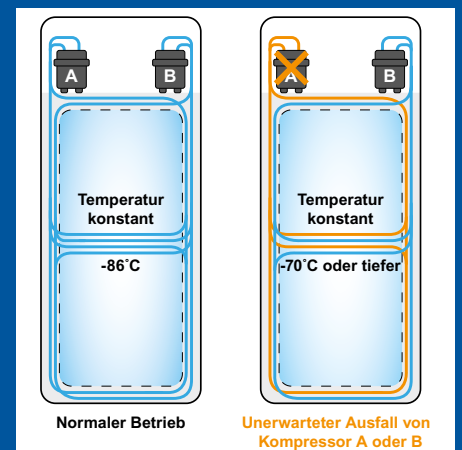

Arctiko True Dual Kühlsysteme laufen bei Ausfall eines Kompressors problemlos weiter.

Ihr konkretes Angebot 
können Sie hier anfordern

7" Touch Display inkl. umfangreicher Temperaturdokumentation und Gerätediagnose

Alle technischen Komponenten im Kopfteil verbaut. Somit keine Beschädigung durch ablaufendes Tauwasser

LED-Licht im Innenraum

Separate Innentüren, einzeln entnehmbar

Höhenverstellbare Fächer im Edelstahlinnenraum in idealer Arbeitshöhe

Direktkühlung (homogene Temperaturverteilung)

Hermetisch abriegelnde Türdichtungen inkl. Türrahmenheizung

Ergonomischer und abschließbarer Türgriff

Sehr robustes und gut zu reinigendes Gehäuse



Modell	ULUF P390GG	ULUF P500GG
Temperaturbereich (°C)	-40 / -86	-40 / -86
Kapazität (L)	385	500
Außenmaße (BxTxH) mm	755x859,5/1002*x1999	895x859,5/1002*x1999
Innenmaße (BxTxH) mm	466x620x1320	606x620x1320
Geräuschniveau db(A)	49	49
Isolierung (mm) / VIP Isolierung	120 / ✓	120 / ✓
Kühl-Technologie	Dual System / Statisch	Dual System / Statisch
Spannung / Frequenz	230V / 50/60H	230V / 50/60H
Stromverbrauch (kWh/24H)	10,6	12,4
Display mit Volltextanzeige	✓	✓
Optische / Akustische Alarm Funktionen	✓ / ✓	✓ / ✓
Temperaturaufzeichnung	✓	✓
RS 485 port	optional	optional
USB port für Daten	✓	✓
Display Typ	7" Touch Display	7" Touch Display
Temperaturanzeige im Display	✓	✓
Vakuumentil	✓	✓
Externe Kabeldurchführung	12mm	12mm
Max. Fächeranzahl (Stück)	5	5
Max. Last pro Fach (kg)	50	50
Kapazität 50/75/96 mm Boxen	264/168/120	352/224/160
Material Innenraum	Edelstahl	Edelstahl
Material Gehäuse	Lackierter Stahl (Antibakt.)	Lackierter Stahl (Antibakt.)

Arctiko ULUF P390GG
Sonder-Preis EUR 8.099,-
zzgl. Lieferung (2 Jahre Garantie)



Arctiko ULUF P500GG
Sonder-Preis EUR 8.499,-
zzgl. Lieferung (2 Jahre Garantie)



Ihr konkretes Angebot 
können Sie hier anfordern